





# Guide au choix

# Sangles de ' lève-personne



### CHOISIR LE BON MODÈLE en fonction des capacités physiques du patient :

Évaluation du contrôle du corps v











Soutien corporel fourni par modèle de sangles Invacare









\*Moins optimal Il est important de considérer que le patient a plus de capacités restantes que ce que la sangle lui permet d'utiliser. Ainsi, ils seront stabilisés durablement. De plus, onutilise plus de tissu que nécessaire, ce qui implique un effort plus important pour l'installation de la sangle

## CHOISIR LA BONNE TAILLE selon le poids mais aussi la taille du patient :

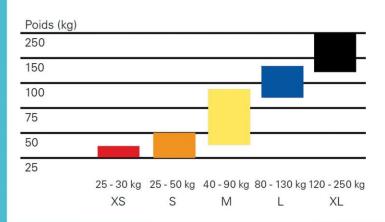

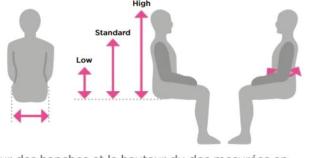

La largeur des hanches et la hauteur du dos mesurées en position assise sont les facteurs les plus importants pour choisir la bonne taille de sangle. Pour les sangles avec ceinture, le tour de taille est également important.

#### Sangle universelle standard

• Maintien du corps et des épaules.

• Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien de la tête, souvent utilisée pour les personnes âgées ayant besoin d'un repère dans l'espace.

• Pour transfert en position assise.

	xs	s	М	L	XL
Α	965	1000	1085	1180	1240
В	800	915	1050	1095	1240
С	405	510	560	585	590
D	365	410	480	555	720

Reportez le nom et la taille de la sangle sur votre prescription ou cochez la sangle souhaitée et joignez ce document à votre prescription.



# Sangles de lève-personne


Guide au choix

#### Sangle universelle avec têtière



- Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière.
- Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien de la tête, du tronc ou des hanches.
- Pour tous types de transferts en position allongée/assise/semi-assise.
- Avec baleines de renfort partie tête.

	xs	s	М	L	XL	XXL
Α	1040	1080	1425	1555	1600	1650
В	740	845	1000	1120	1190	1285
С	615	770	900	1000	1000	1000
D	310	350	375	450	570	600

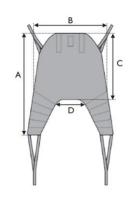


#### Sangle hamac avec têtière



- Conseillée pour les personnes ayant un très faible tonus de la tête et du tronc.
- Large support de jambes, rembourré, multipositionnable, pour s'adapter à tous types de transferts et de patients.
- Pour transfert en position assise et semi-assise.
- Pour toute amputation courte ou longue.

	xs	S	М	L	XL
Α	1040	1150	1395	1445	1460
В	970	1050	1170	1290	1330
C	510	550	610	675	745
D	960	1020	1160	1280	1470

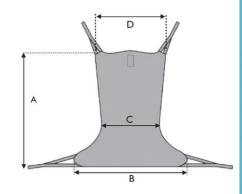

#### Sangle toilette (avec ou sans têtière)



- Design étudié pour faciliter le transfert en position assise, aux toilettes ou sur une chaise garde-robe.
- Conseillée pour des personnes ayant un bon maintien du tronc. Large ceinture dorsale rembourrée pour un bon maintien et plus de confort sous-axillaires.
- Dotée de supports de jambes rembourrés pour une répartition des points d'appui optimale.
- Avec boucle de fermeture.
- Version avec têtière : avec baleines de renfort partie tête.

	Sans têtière : Avec têtière :					
		xs	s	М	L,	XL
	Α	840	870	950	1020	1100
	В	620	710	800	900	1080
	С	160	200	230	230	270
	D	380	430	495	600	760
avec têtière :	E	400	400	465	465	465

